


世界标准

50 多年来，Q-Panel 品牌的标准测试底板，以其一致、均一的质量，被公认为测试底板的世界标准。

每年都有数以千计的实验室使用数以百万计的 Q-Panel 品牌的钢制和铝制底板，用于色彩开发、老化测试、盐雾实验、腐蚀测试、物理性能测试和质量控制等。各种尺寸和型号的标准测试底板都可快速从仓库中直接提货。



标准测试底板有不同的尺寸和处理工艺。

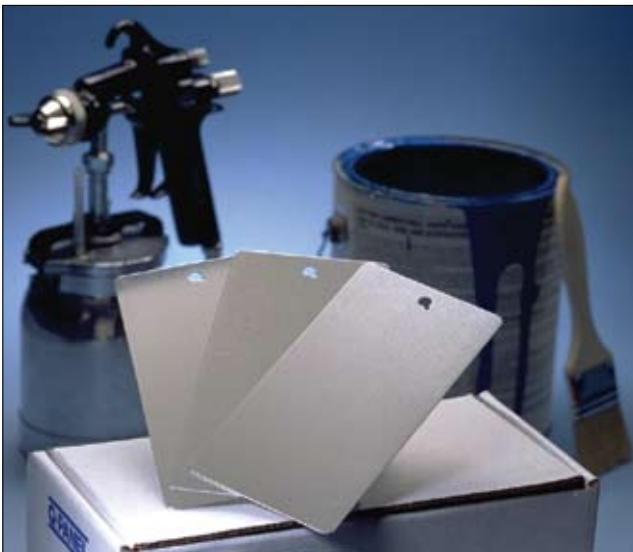

测试底板储存在洁净环境下，大多数情况下拆包即可使用。

钢和铝测试底板

Q-Lab 公司的测试底板经过严格的测试，最大程度减小金属的差异造成的误差。他们清洁、一致、方便和经济能确保您的满意。

清洁

Q-Panel 品牌的标准测试底板在生产过程进行了彻底清洗，清除掉表面上可能存在的任何油渍。最少的手工操作确保所有的底板在包装时彻底的清洁。

一致性

最低价格保证一致性的三个因素：

- 从特定钢铁厂批量采购金属卷材
- 在高速自动流水线上生产
- 在从原材料到成品的几个生产阶段严格检查

测试底板的处理和保存注意事项

- 尽可能少的接触测试底板，为了防止留下指纹和弄污，一般只接触测试板的边缘，并随时佩戴干净的白手套。
- 大多数情况下，测试底板拆包即可使用。但是，对于特殊应用，在涂层前，有时可能有必要先用蒸馏水或丁酮除去底板上防锈剂的痕迹。
- 原封包装的测试底板应放在干燥，气候可控的环境里，尽量避免接触水，灰尘或污染。



使用测试底板要多加小心，从拆包到测试过程中的移动样品都要小心。

方便


Q-Panel 品牌的标准测试底板使用非常方便，所有底板都经过预清洗，底板上有一个1/4英寸（6毫米）的孔。为了安全和操作方便，测试底板的四角为圆角，而且边缘经过打磨处理。钢板贮存在装有气相防锈剂的塑料袋里，且放置在硬纸盒里面，我们的钢板保存期长达10年。

经济

由于大批量生产，我们的标准测试底板，可能比您想象的还要便宜。购买清洁、安全、标准的测试底板减少了实验室人员花在清洗和处理测试底板上的宝贵时间。



质量控制

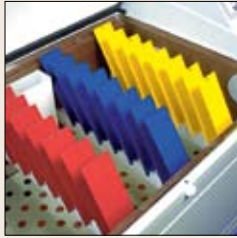

腐蚀测试



色彩开发



外观评估



老化测试

Q-Panel 品牌的测试底板是研究开发和质量控制的世界标准


全球各地的实验室正在使用我们的钢板和铝板用于涂料、金属涂层、粘合剂、密封胶、和防锈剂的测试。从 1956 年开始, Q-Panel 品牌树立了洁净、一致的材料品质和处理工艺以及负担得起的价格的世界标准。



特殊测试底板

除了我们的标准底板, 我们也可以提供价格单上没有的其它型号和尺寸的测试底板。其中包括直径为1英寸(2.54 厘米)和尺寸为 15英寸 x 24英寸(38 厘米 x 61 厘米)的汽车测试板。有些客户, 如建筑公司把带涂层的铝板作为销售展示板。

我们可以提供不同形状、尺寸或者由不同的合金材料、处理工艺加工而成的特殊测试底板。当特殊测试底板需求量较多时, 可降低生产成本。或当可以用我们库存的金属卷材以及一些比较常用的合金材料来进行生产时, 特殊测试底板的价格也会降低。

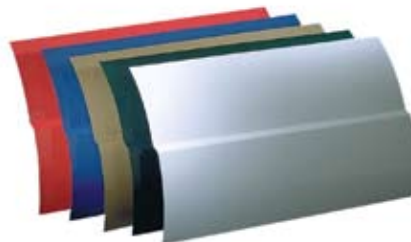

汽车测试底板

**请认准这个"Q"型小孔
这是我们的注册商标...
也是您的质量保证!**

Q-Lab Corporation



Q-Lab Headquarters
& Instruments Division
Cleveland, Ohio USA
Tel. +1-440-835-8700
Fax: +1-440-835-8738
info@q-lab.com

Q-Lab Europe, Ltd.
Bolton, England
Tel. +44 (0) 1204-861616
Fax: +44 (0) 1204-861617
info.eu@q-lab.com

美国Q-Lab公司中国代表处
中国上海
Tel. +86-21-5879-7970
Fax: +86-21-5879-7960
info@q-lab.com.cn

Weathering Research Service
Q-Lab Florida
Homestead, Florida USA
Tel. +1-305-245-5600
Fax: +1-305-245-5656
info@q-lab.com

Q-Lab Arizona
Buckeye, Arizona USA
Tel. +1-623-386-5140
Fax: +1-623-386-5143
info@q-lab.com

www.q-lab.com